



UA

Інструкція з використання
ВАГИ ДИТЯЧІ ЕЛЕКТРОННІ
Модель 6475

Momert Co. Ltd.

2400 Dunaújváros - HUNGARY, Papírgyári út 12-14.

Phone: +36 25 555-100, Fax: +36 25 555-199

www.momert.hu

Інструкція з використання ВАГИ ДИТЯЧІ ЕЛЕКТРОННІ Модель 6475

Ваги дитячі електронні були спеціально створенні для визначення маси тіла Вашої дитини і відображення різниці його маси від попереднього зважування.

Перед початком користування вагами уважно прочитайте цю інструкцію!

УВАГА! Для забезпечення надійної роботи вагів категорично заборонено кидати ваги, стрибати на платформі, перевищувати максимальне допустиме навантаження!

Це може пошкодити електронний механізм вагів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Високоточна система вимірювання;
- Функція відображення різниці теперішньої і попередньої ваги;
- Функція виділення маси тари «TARE»;
- Автоматичне вимикання;
- Індикація "LO" при низькому заряді елементів живлення;
- Індикація «Err» при перевищенні максимального допустимого ваги;
- Автоматична функція "HOLD". Не дивлячись на те, що діти надто рухливі, ваги мають можливість зважити дитину точно, за допомогою використання функції автоматичного рухливого балансиру.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Живлення: літєві елементи живлення тип CR 2032 3V, 2 шт. (входять в комплект)

Діапазон зважування: до 20 кг

Ціна поділки: 5 г

Одиниці вимірювання: kg, lb, st
Температура для зважування / зберігання: 20-25°C / 15-40°C
Дисплей: PK (LCD) дисплей 27 мм

ЗАХОДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:


- Зберігайте вказану полярність елементів живлення при встановленні або заміні.
- Якщо Ви не плануєте користуватися приладом тривалий час, видаліть з нього елементи живлення.
- Даний прилад не призначений для використання особами з обмеженими розумовими здібностями, особами з недостатнім досвідом, окрім як під контролем осіб, відповідальних за їхню безпеку (включаючи дітей).
- Не використовуйте прилад для інших цілей, окрім вказаних в інструкції з використання.
- Встановлюйте та використовуйте прилад тільки на горизонтальній твердій поверхні.
- Перед чисткою чи зняттям кришки (ложементу) вимкніть прилад.
- Не використовуйте для очищення вагів абразивних або хімічно агресивних розчинів.
- Не користуйтеся приладом при виявлених недоліках в роботі, а також після падіння або коли на нього була пролита рідина. Відправте прилад в авторизований сервісний центр для перевірки або ремонту.
- Прилад призначений тільки для побутового використання і не призначений для використання в комерційних цілях.
- Не розташовуйте прилад поруч з джерелами тепла, таких як радіатори опалення, пічки.
- Оберігайте прилад від попадання вологи та прямих сонячних променів.

- Не торкайтесь до приладу вологими або мокрими руками.
- Оберегайте прилад від ударів і падіння.
- Не намагайтесь ремонтувати прилад самостійно. Звертайтеся в авторизований сервісний центр.

В разі невиконання вказівок виробника і самостійного ремонту приладу, гарантія втрачає силу.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ:

1. Платформа вагів. Ложемент , що знімається
2. Кнопка ВКЛ./ВИКЛ. "ON/OFF"
3. Кнопка ТАРА "TARE"
4. Кнопка вибору одиниць зважування Kg/Lb/St
5. Дисплей

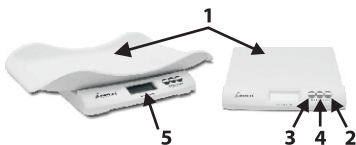

ІНСТРУКЦІЯ З ЗАСТОСУВАННЯ:

Ви придбали функціональні ваги, які використовуються для зважування як новонароджених так і маленьких дітей з відображенням змін у вазі.

Вмикання та налаштування:

- ваги вмикаються і вимикаються з допомогою кнопки ON/OFF (натисніть кнопку один раз)
- з допомогою кнопки TARE Ви можете використовувати функцію тарування. На дисплеї з'явиться "0.00" через 2 секунди після натискання на неї. Якщо Вам не потрібні показники різниці в вазі, то, натиснувши кнопку TARE на протязі 3

- секунд, показник пам'яті буде видалено. Піктограма «М» зникне з дисплея.
- кнопка UNIT необхідна для вибору одиниць виміру. Одиниці виміру, що використовуються можна побачити в правій стороні дисплея

ВИКОРИСТАННЯ:

1. Видаліть ізоляційну пластинку з відсіку для елементів живлення, що знаходиться в нижній частині корпусу. Встановіть ваги на рівну, тверду, горизонтальну поверхню.



2. Встановіть піддон (ложемент), якщо Ви використовуєте ваги для зважування немовлят.



3. Якщо ви будете зважувати більш дорослу дитину, тоді немає необхідності встановлювати піддон (ложемент).
4. Натисніть кнопку ON/OFF , на дисплеї з'явиться значення "0.00" kg.



5. Покладіть немовля або поставте дитину на ваги. Показники ваги з'являться на дисплеї через декілька секунд і зберуться в пам'яті автоматично. Буква "М" вказує на наявність даних в пам'яті вагів. Після наступного зважування на дисплеї з'являться показники ваги і різниця з попереднім зважуванням, які будуть змінюватися по черзі через 2 секунди. Показники останнього зважування автоматично зберуться в пам'яті, як у випадку ручного вимкнення, так і у випадку автоматичного вимкнення.
6. Натиснувши кнопку ON/OFF один раз, ваги вимикаються. Якщо Ви не використовуєте ваги на протязі 30 секунд, вони вимкнуться автоматично.

ФУНКЦІЇ ПАМ'ЯТІ:

Якщо на дисплеї з'явиться значок "М", це означає, що цифровий показник останнього зважування був внесений в пам'ять і тому буде відображатися різниця в вазі. Якщо Вам не потрібні показники різниці в вазі, то, натиснувши кнопку TARE на протязі 3 секунд, показники будуть видалені з пам'яті. Значок "М" зникне з екрану дисплея. Якщо ви вилучите елементи живлення, то показник, що був збережений в пам'яті, також буде видалений.

ВАГА ТАРИ:

Якщо Ви використовуєте при зважуванні не тільки піддон (ложемент), але і додаткові предмети, що мають вагу (одіяло, подушку), загальною вагою до 5 кг., то після натискання кнопки TARE, коли на дисплеї з'явиться позначення "0.000", максимальна сумарна вага (предмет на ложементі + дитина), має бути не більше 20 кг.

ІНША ІНДИКАЦІЯ НА ДИСПЛЕЇ:

Якщо після натискання кнопки ON/OFF на дисплеї з'являється «LO», або взагалі відсутня індикація, це означає, що елементи живлення розряджені і їх потрібно замінити.



Відкрийте відділення для елементів живлення, що знаходиться на нижній стороні приладу, обережно вийміть елементи живлення, зміщуючи елемент живлення в сторону металевих пластин-утримувачів. Проведіть заміну на аналогічні елементи живлення (зберігаючи полярність) та закрийте кришку відсіку.

Використані елементи живлення потрібно здати в пункт збору для утилізації. Гарантія не розповсюджується на елементи живлення.

Якщо на дисплеї з'явилася піктограма «Err», це означає, що ваги перегружені і можуть бути пошкоджені.



Якщо на дисплеї з'явилася піктограма «OUT2», це означає, що електронний механізм вийшов з ладу по причині перевищення максимальної ваги, падіння чи стрибання на платформі вагів. В цьому випадку власник втрачає право на гарантійне обслуговування.



службі за місцем проживання, що займається ліквідацією побутових відходів або в магазині, де Ви придбали прилад.

ДОГЛЯД ЗА ВАГАМИ:

Для чищення поверхні приладу використовуйте тільки вологу серветку, без додавання агресивних хімічних або амбразивних речовин. Категорично заборонено мити прилад під проточною водою або занурювати в воду!

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ:

Ремонт, приладу повинна проводити лише кваліфікована сервісна служба.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:

- Коробку від приладу можна здати в пункти збору вторинної сировини.
- Поліетиленову плівку здайте в пункт збору сировини для повторної переробки.

Переробка приладу в кінці терміну його використання для повторного використання матеріалу:



Символ на виробі або на його упаковці вказує на те, що даний виріб не відноситься до домашнього сміття. Його необхідно відвезти в місце збору для переробки електричного та електронного устаткування. Забезпечення правильної утилізації цього виробу Ви допоможете запобігти негативному впливу на навколишнє середовище і здоров'я людей, які можуть виникнути в результаті ліквідації цього виробу. Більш детальну інформацію про переробку даного виробу для повторного використання матеріалів Ви дізнаєтеся у відповідній

Виробник: Momert Co Ltd., Papírgyári út 12-14, H-2400 Dunaújváros, Hungary/Момерт Ко Лтд., вул. Папіргуарі 21-14, H-24000 Дунайварош, Угорщина. Виготовлено в Угорщині.

Офіційний дистрибутор в Україні: ТОВ «Теспро», 03191, м. Київ, вул. Василя Касіяна, 2/1, н.п. 1,2. тел.: (044) 303 98 88, www.tespro.ua, email: office@tespro.ua

Гарантійний термін: 12 місяців з дня продажу Покупцеві.

Гарантійне обслуговування проводиться в наступних випадках:

- наявний гарантійний талон з вказаною датою продажі;
- підпис Покупця, штамп торгуючої організації, товарний чек;
- виріб надається в чистому вигляді, без слідів самостійного втручання, механічних пошкоджень;

Гарантійне обслуговування не поширюється:

- на вироби, які експлуатувалися з порушенням вимог інструкції з використання;
- при наявності механічних пошкоджень виробу;
- при не передбаченій інструкцією по експлуатації розбиранні і другом стороннє втручання в його конструкцію;
- при проникненні різних рідин, комах та інших сторонніх предметів всередину виробу;
- на елементи живлення.

GB – Declaration of conformity:

We, **Momert Zrt.***


Declare that product:

Name: Momert, **Model:** 6475,

Description: Electronic baby and child scale

It complies with the listed standards and regulatory requirements:

Electromagnetic compatibility directive: **

*  12.-14. Papirgyari str., Dunaujvaros, H-2400

 + 36 / 25 / 555-100  + 36 / 25 / 555-199

 info@momert.hu  www.momert.hu

** EN 61000-6-3: 2007+A1:2011

EN 55014-2: 1999

EN 61000-4-2: 2009



Tamás Baritsa

Chief Commercial Officer

Dunaujvaros, 05.01.2009., Momert Zrt.

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

